



プロアジーク

PRO AGÉQUE

理想の美肌へ導く「オールインワン美容機器」



一緒に使って「もっと」を叶える 極上の美肌力を引き出す ベストコンビネーション

年齢に負けない美しい素肌を保つためには、日々のお手入れが大切です。

だからこそ、プロ アジークでのお手入れをはじめましょう。

イオンやソニックのはたらきでローションやクリームのスキンケア効果を高め、

ハリとうるおいに満ちた肌へ導きます。

さあ、このベストコンビネーションのチカラで極上の美肌へ。

ご家庭でできる本格ケアで、あなたの“理想の肌”が、はじまります。



ベストコンビネーションケア

専用化粧品と一緒にお使いください。

エックスワン クレンジングウォーター(145mL)

イオンクレンジングの効果を引き出すために不可欠な専用化粧品。シソエキス・トウキ根エキス配合。肌のキメを整え、乾燥から肌をまもります。



エックスワン ソニックジェル(200g)

ソニックトリートメントに必要な専用ジェル。シソエキス・トウキ根エキス配合。水分バランスがよく、なめらかな使用感で肌あれ防止効果もあります。





PRO AGÉQUE

プロ アジークの特長

1. 超音波搭載 イオンクレンジング機能*
2. ソニックトリートメント機能*
3. 超音波搭載 イオントリートメント機能*
4. ハイパワーでボディにも使用可能

*5段階レベル調整が可能です。

プロ アジークの「3つの効果」

超音波搭載 イオンクレンジング (イオン導出)


肌の奥の汚れをすっきり落とす。

毎日のW洗顔だけでは、メイクの落とし残しや古い角質、ほこりなど、目に見えない汚れを落とすことはできません。イオンクレンジングなら、肌に負担をかけないディープクレンジングで、肌の奥の汚れを取り去ることができます。

目に見えない汚れもすっきり

肌にやさしい

くすみのない輝く美肌へ

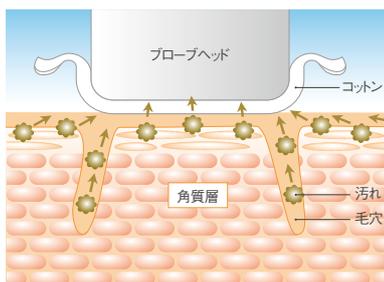

肌の奥にひそむ汚れを、イオンの力で吸着させます。

ソニックトリートメント (超音波トリートメント)


肌をひきしめ、ハリ・弾力を与える。

1秒間に100万回(1MHz)の微細な超音波の振動が肌に適度な運動効果を与えます。美容や健康に最適な超音波の周波数は、この1MHzとされています(超音波とは周波数2万Hz以上の音波のことをいいます)。

発泡作用:毛穴の汚れや古い角質を取る

透熱作用:肌を温め、調子をよくする

振動作用:ひきしまった元気な肌へ

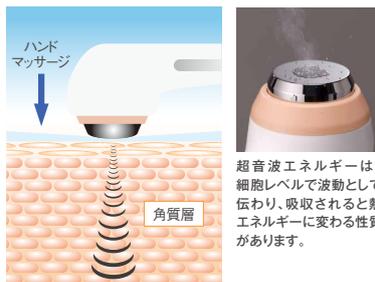

ハンドマッサージでは届かない肌細胞へ直接はたらきかけ、ハリや弾力を高めます。



超音波搭載 イオントリートメント (イオン導入)

うるおいを肌の奥へ浸透させる。

エステでも人気のイオントリートメントは、イオンの力で効果的に肌の奥へ化粧品や美容液の成分を導入し、浸透させます。角質層をしっかりとるおわせることで、肌のコンディションをよりよい状態へ導きます。

美容成分を肌の奥へ浸透させる

うるおいに満ち、キメの整った美肌へ

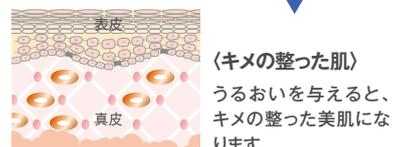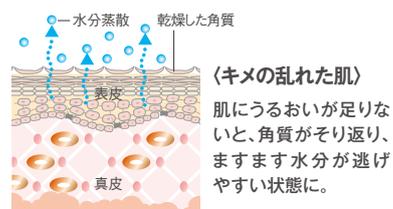

◆プロ アジーク操作方法 ※液晶パネルは説明用に全て表示しています。実際の運転時とは異なります。

簡単なボタン操作の モード・パワー選択


プロ仕様でありながら、できるだけ簡素化し、簡単操作を実現しました。



- ①<フェイスボタン> 顔のお手入れの際に押します。(1回押すとソニックトリートメントの連続の設定となります。)
- ②<ボディボタン> ボディのお手入れの際に押します。(1回押すとソニックトリートメントの連続の設定となります。)
- ③<イオンボタン> イオンクレンジング・イオントリートメントのお手入れの際に押します。(1回押すとイオンクレンジングのレベル1の設定となります。)
- ④<レベルボタン> 上のボタンでレベルアップ、下のボタンでレベルダウンができます。
- ⑤<モードボタン> ソニックトリートメントの連続と断続、イオンクレンジングとイオントリートメントの切り替え時に押します。
- ⑥<スタート・ストップボタン> 選択されたモードをスタート・ストップする際に押します。

見やすい大型液晶パネル

大きな液晶パネルで、選択した各種モードなどを確認できます。

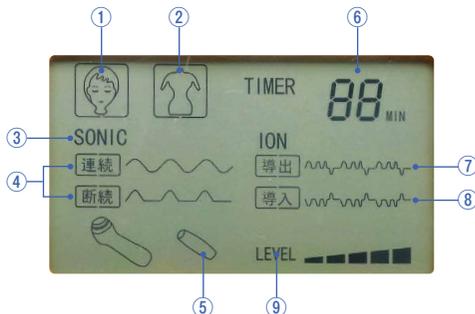

- ①<フェイスボタン> を押すと表示されます。
- ②<ボディボタン> を押すと表示されます。
- ③ソニックトリートメント時に表示されます。
- ④連続・断続が表示されます。
- ⑤イオンモードを選択時、アースグリップを接続していると表示されます。
- ⑥お手入れ時間が表示されます。
- ⑦イオンクレンジング選択時に表示されます。
- ⑧イオントリートメント選択時に表示されます。
- ⑨レベルが5段階で表示されます。

持ちやすく使いやすい プローブ形状

握りやすく、超軽量で使いやすいL字型プローブ。フェイス用と、広範囲のケアに便利なボディ用があります。



お友達にお手入れをするときに 必要なアースグリップ

イオンクレンジング・イオントリートメントをお友達にしてあげる際には、このグリップを握ってもらいます。



フェイスプローブ電極グリップ(左右)、アースグリップ素材
ABS樹脂、銅下地+ニッケルクロームメッキ

5段階のレベル設定：

すべてのモードで肌の調子やお好みに合わせて、5段階のレベル調節が可能です。(初めて使用する際は1~2で使用し、数回ご使用のうえ問題ないようであればレベルアップをおすすめします。)

◆ご使用方法

▼イオンクレンジング

プロアジーク

メイクをW洗顔で落としした後におこないます。

●コットン装着

ヘッド部分にコットンを1枚おき、コットンカバーをかぶせ(①)、エックスワン クレンジングウォーターをたっぷり含ませ(②)。



●持ち方

両サイドの電極グリップに手が触れるように、本体を握ります(③)。



▼ソニックトリートメント

プロアジーク

コットンカバーをはずします。エックスワン ソニックジェルを肌へのぼし、プローブヘッドを直接肌に当てます(④)。お手入れが終わったら、ジェルを洗い流します。



▼イオントリートメント

プロアジーク

●コットン装着

ヘッド部分にコットンを1枚おき、コットンカバーをかぶせ(⑤)、インナップEX モイスチャローション MDまたは、モイスチャローションモア MDをたっぷり含ませ(⑥)。



●持ち方

両サイドの電極グリップに手が触れるように、本体を握ります(⑦)。



化粧品と一緒に使って効果アップ! 5ステップで理想の肌へ

Face — 週1回 —

Step1	Step2	Step3	Step4	Step5
<p>クレンジング・洗顔</p>  <p>インナップEX クレンジングクリーム MD</p> <p>エックスリュークス エグゼティション マッサージクレンジングW</p> <p>インナップEX クレンジングフォーム MD</p> <p>エックスリュークス エグゼティションクリームウォッシュW</p>	<p>イオンクレンジング 5分</p>  <p>プロアジーク Eックスワン クレンジングウォーター</p>	<p>ソニックトリートメント 10分</p>  <p>プロアジーク Eックスワン ソニックジェル</p>	<p>イオントリートメント 5分</p>  <p>プロアジーク インナップEX モイスチャーローション MD</p> <p>インナップEX モイスチャーローション モア MD</p>	<p>スキンケア</p>  <p>Eックスワン トリートメントエッセンス</p> <p>インナップ ホホワイトピュアエマルジョン</p> <p>インナップEX モイスチャークリーム MD</p> <p>インナップEX モイスチャークリーム モア MD</p>

Body — 週1回 —

Step1	Step2	Step3	Step4	Step5
<p>入浴</p>  <p>ビルフィーノ バスソルト</p>	<p>洗浄</p>  <p>ビルフィーノ ボディシャンプー</p>	<p>入浴</p>  <p>ビルフィーノ バスソルト</p>	<p>ソニックトリートメント 10~20分</p>  <p>プロアジーク Eックスワン ソニックジェル</p>	<p>マッサージ・保湿</p>  <p>ビルフィーノ ジェルマンズール</p>

◆よくあるご質問

Q. イオンクレンジングはメイク落としに使えますか?



A. イオンクレンジングは、W洗顔では落ちにくい肌の奥の汚れをとるものです。メイク落としではありません。必ずW洗顔をしてから使用してください。

Q. 顔のお手入れは、イオンクレンジング、ソニックトリートメント、イオントリートメントのすべてをしないとダメですか?



A. 極上肌に導くためにはトータルでのお手入れをおすすめしますが、時間の余裕や肌状態に合わせて機能を使い分けてご使用ください。右記の表も参考にしてください。

Q. どんな肌質の人でもプロアジークは使用可能ですか?



A. 医療機器ではありません。炎症がひどい時や、刺激を強く感じる時はご使用をおやめください。肌が敏感でご心配な方は、**お客様相談室 0120-039-198** へお問い合わせください。

	イオンクレンジング	ソニックトリートメント	イオントリートメント
週1回のスペシャルケア	★	★	★
くすみが気になる	★		
化粧のりが悪い		★	★

プロ アジークシリーズ



プロ アジーク 基本セット

商品番号 304

本体価格 **197,143円**
(税込み価格 216,857円)

(セット内容)

- プロ アジーク(本体)
- フェイスプローブ
- ボディプローブ
- アースグリップ
- ACアダプター



プロ アジーク フェイス用

商品番号 335

本体価格 **154,286円**
(税込み価格 169,714円)

(セット内容)

- プロ アジーク(本体)
- フェイスプローブ
- アースグリップ
- ACアダプター



プロ アジーク ボディプローブ

商品番号 336

本体価格 **42,858円**
(税込み価格 47,143円)

プロ アジーク専用 ACアダプター

商品番号 444

本体価格 **3,677円**
(税込み価格 4,044円)



プロ アジーク専用 コットンカバー

商品番号 443

本体価格 **391円**
(税込み価格 430円)



専用化粧品

エックスワン ソニックジェル (200g)

商品番号 851

本体価格 **3,570円**
(税込み価格 3,927円)



エックスワン クレンジングウォーター (145mL)

商品番号 852

本体価格 **4,280円**
(税込み価格 4,708円)



ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。次のような方は使用しないでください。(詳しくは取扱説明書をお読みください。)
・妊娠中の方 ・医療用電子機器(ペースメーカー)などをお使いの方 ・特に肌が敏感な方 ・疾患をお持ちの方
【現金返済保証制度】 「プロ アジークシリーズ」は、未使用・未開封で、セット内容が全てそろっている場合に限り、現金返済保証制度対象となります。

私が自信をもっておすすめします。

株式会社 エックスワン

〒107-0062 東京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F Tel 03-6822-3570(代)

株式会社エックスワンは1987年の創業以来、化粧品や健康食品など、すこやかで美しい暮らしのため、より「安全」、より「安心」、より「高品質」な商品を自社開発し、会員の皆さまの手を通して商品特性を紹介させていただいている会社です。

ご相談・お問い合わせは お客様相談室 **0120-039-198**

受付時間9:00~18:00
(土・日・祝日は除く)

エックスワン商品とライフスタイルをご提案するホームページ。 www.x-one.co.jp

※ 商品の色は印刷のため、実物と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 記載事項の無断使用を禁ず。 XAW[6304]00222 300(J)



この印刷物は、環境を配慮して
植物油インキを使用しています。



4 582437 923702