


X-Behauty Pro

エックスビューティープロ
取扱説明書／保証書

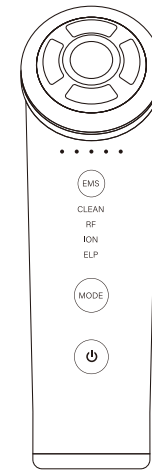

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（4～8ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名・製品ロット番号」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

エクスビューティープロをお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。



WEBカタログはこちらのQRコードをお読み取りください。
エクスワン公式ホームページ(www.x-one.co.jp)でご覧いただけます。

X-Beauty Pro

もくじ

安全上のご注意	-----	P.4
使用上のお願い	-----	P.8
各部のなまえ	-----	P.9
モードについて	-----	P.10
準備する	-----	P.12
使い方		
充電する	-----	P.13
基本の流れ・コットンのつけ方	-----	P.14
ケアの仕方	-----	P.15
動かしかた	-----	P.16
各モードの使い方	-----	P.17
使い終わったら	-----	P.22
よくあるお問い合わせ	-----	P.23
故障かな?と思ったら	-----	P.26
廃棄するときのお願い	-----	P.27
海外で使うとき	-----	P.27
製品仕様	-----	P.28
保証・アフターサービス	-----	P.29
保証書	-----	裏表紙

はじめに

使い方

こんなときは

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■表示内容とは異なる誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分して説明しています。

危険

人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が発生するおそれがある内容です。

警告

人が死亡または重症を迫る可能性が想定される内容です。

注意

人が傷害を負う危険、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険



●下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない。
医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故の原因となります。

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器

警告



●下記の人には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。

- ・心臓疾患の人
- ・顔面の神経障害のある人
- ・出血性疾患
- ・血友病疾患などの血液異常の人
- ・幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない人
- ・交通事故などにより頭部に後遺症がある人

警告



●下記の人には使用しない。
肌トラブル、やけどの原因となります。

- ・皮膚アレルギーの人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ・温度の感覚が自覚できない人
- ・妊娠中および産後1か月の人
- ・酒気帯びの人

●ELP / RF / EMS モードは、心臓の近くには使用しない
事故や体調不良の原因となります。

●下記の場合や、部位には使用しない
肌や身体、目のトラブルの原因となります。
ご自身での判断が難しい場合は、使用前に医師にご相談ください。

- ・体調がすぐれない場合
- ・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬
眠気を誘う薬を服用した場合
- ・疲労の激しい場合
- ・肌に傷や湿しんはれものなどのある部位
- ・皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- ・当日、脱毛処理をした部位
- ・外科手術（形成・美容など）を受けた部位
- ・のど・粘膜の部位
- ・まぶた



●部に使用しない



●同じ箇所にあて続けず、肌の上を動かしながら使用する。
守れない場合、やけどの原因となります。

●貴金属類・時計などは外して使用する。

●肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。
守れない場合、事故や肌・身体トラブルの原因となります。

安全上のご注意

警告



● 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する事故や体調不良、肌トラブルの原因となります。

- ・今までに重い病気をした人
- ・急性疾患の人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・敏感肌の人
- ・感染症疾患のある人
- ・有熱性疾患のある人
- ・糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・エステ、クリニックなどで、ダウンタイム (回復に要する時間) が必要な施術、および肌に強い赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた人

警告

USB電源アダプター・USBケーブルは



次の行為はしないでください。感電ややけど、ショートによる火災などの原因となります。

- 水につけたり、水洗いしない
また、風呂、シャワー室で使用しない
- 傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- 傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など

- 専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない



次の行為を守ってご使用ください。守れない場合、感電やけが、絶縁不良による火災の原因となります。

- 掃除の際は、USB 電源アダプターをコンセントから抜く
- ほこりが付着しないように定期的に掃除する
→ USB 電源アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

警告

電源は



次の行為はしないでください。感電やけが、発熱による火災の原因となります。

- めれた手でUSB電源アダプターをコンセントから抜き差ししない
- コンセントやたこ足配線器具の定格を超える使いかたをしない



次の行為を守ってご使用ください。守れない場合、感電や火災の原因となります。

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
- 交流100～240Vで使用する

本体は



次の行為はしないでください。事故やけが、感電、火災の原因となります。

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
- 改造・分解・修理しない
- 火への投入、加熱をしない、高温での充電・使用・放置・保管をしない
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)

異常・故障時には



次の行為を守ってご使用ください。守れない場合、感電や火災、けがの原因となります。

- 直ちに使用を中止する
- USB 電源アダプター使用時は、USB 電源アダプターを抜く
<異常・故障例>
本体、USB 電源アダプター、コードが
・変形したり異常に熱い
・こげ臭いにおいがする

安全上のご注意

⚠ 注意

電源は


- ❗ 次の行為を守ってご使用ください。守れない場合、感電やけが、絶縁不良・漏電による火災の原因となります。
- 電源プラグやUSBプラグ・アダプタープラグにピンやゴミを付着させない
- 充電時以外は、USB電源アダプターをコンセントから抜く
- USB電源アダプターをコンセントから抜くときは必ずアダプターを持って引き抜く

次のことも注意する


- 🚫 次の行為を守ってご使用ください。守れない場合、やけど、炎症、けがの原因となります。
- ヘッドを金属にあてない
- ご使用前にはヘッドに割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する
- 顔、デコルテ、首のお手入れのみに使用する（パッチテストを行う腕は除く）
- 使用中、歯に違和感が生じる場合は、レベルを下げる。または部位をずらして使用する（歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、刺激により歯に違和感を感じることがあります）。
- 本書の使用頻度と動かしかたを守る（肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状悪化の原因）
- ペットには使用しない

使用上のお願い

- 故障・破損を避けるために、下記のことをお守りください。
- 使用後は、湿気の少ないところに保管する
 - 落としたり、ぶつけたりしない
 - 不安定な場所に保管しない

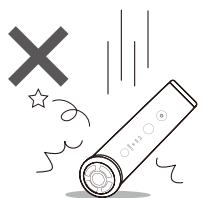

各部のなまえ

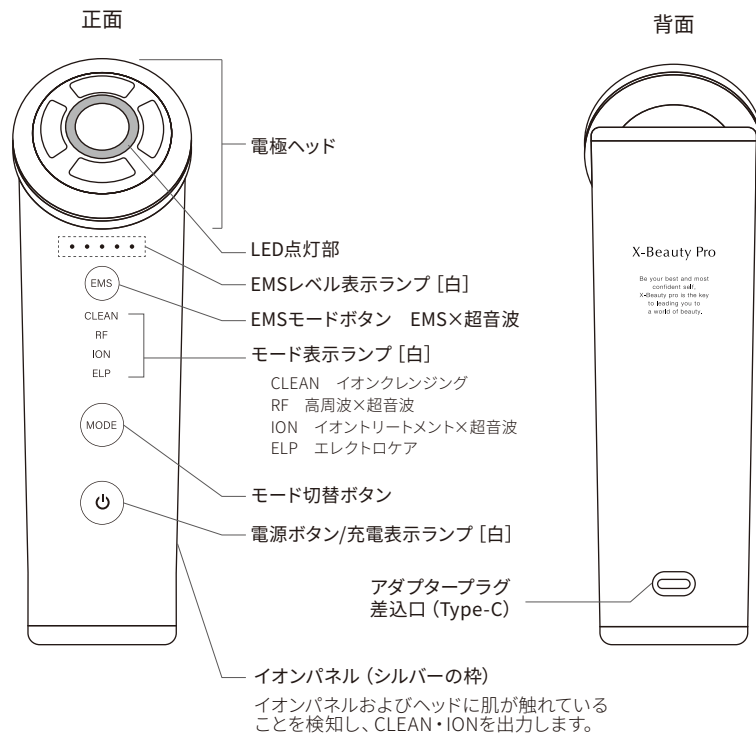


商品番号 325
コットンリング(シルバー)



コットンをヘッド部分に固定できます。


商品番号 326
USB電源アダプター

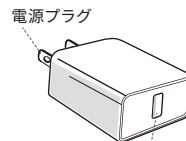

USBプラグ(Type-A)

ご使用前にアダプター本体の「警告」を必ずお読みください。

商品番号 327
USBケーブル

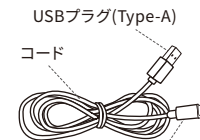

USBプラグ(Type-C)

モードについて

スタンバイ	電源ボタン点灯
-------	---------

充電中	電源ボタン点滅
-----	---------

	モード	ボタン表示	レベル表示	LED点灯部	コットンリング	機能	使用頻度	特長	推奨化粧品	全顔推奨動作時間
デイリーケア	ION	ION 文字点灯	-	赤	要	・イオントリートメント ・キャビテーション (超音波)	1日2回、 毎日使用可能 スペシャルケア と組み合わせて 同日使用可能 その場合使用 順序を守る	イオン化した美容成分の肌への浸透をサポートし、みずみずしくうるおった肌へ整えます。	専用化粧水 ・美容液	約10分
	RF	RF 文字点灯	-	赤	不要	・RF (高周波) ・キャビテーション (超音波)		肌の深部を温め、微細な振動で肌に適度な運動効果を与えます。	専用ジェル	約10分
スペシャルケア	CLEAN	CLEAN 文字点灯	-	青	要	・イオンクレンジング ・振動	1日1回、 1日以上空けて 週2回まで	洗顔では落としきれない肌表面や毛穴の汚れを浮かせて吸着し、すっきりと落とします。	専用クレンジング ウォーター	約10分
	ELP	ELP 文字点灯	-	赤	不要	・ELP (エレクトロケア)		通常では浸透しにくい高分子成分やイオン化しない美容成分を、特殊な電気パルスを使い角質層までしっかり浸透させます。	専用美容液	約10分
	EMS	EMSレベル 表示ランプ 点灯	5段階	赤	不要	・EMS ・キャビテーション (超音波)	1日1回、 1日以上空け 週3回まで	電気刺激により筋肉を効果的に収縮させ、引き締まった印象へ導きます。	専用ジェル	約10分

使い方

タイマー機能	安全に使っていただくため、タイマー機能を搭載しています。
--------	------------------------------

- ・各モード5分経過後に、アラームが鳴り、スタンバイ状態になります。
- ・スタンバイ状態で動作が確認できない場合、3分後にアラームが鳴り、自動オフします。


専用ジェル適量(目安)	約1g(直径約1.5cm)
-------------	---------------

EMSをより効率的に肌に伝える専用ジェルをおすすめします。

LEDライトとは

エステサロンでも使用される光美容技術です。


- ・赤LED：肌を温める
- ・青LED：毛穴を引き締める

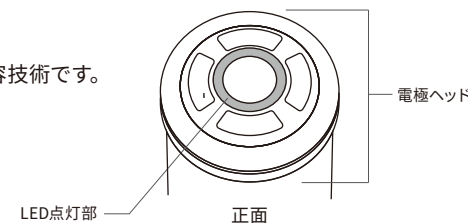

準備する

エクスビューティープロや、専用化粧品をはじめでご使用になる際は必ず、パッチテスト（皮膚試験）をしましょう。

専用ジェルまたはお手持ちの化粧品と、この商品をお組み合わせることで肌のトラブルを防ぐために、必ずテストを行ってください。

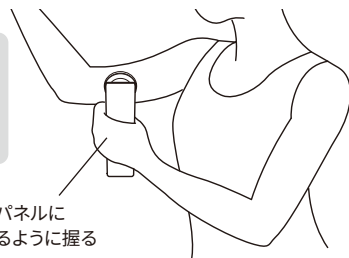

側面のイオンパネルに
しっかり触れるように握る

1 パッチテストを行う部位（腕の内側）をせっけんで洗い、タオルなどでふき取る

2 専用ジェルまたは専用化粧品をつける

- ・ヘッドの大きさ程度にうすく塗ります。
- ・専用ジェルと専用化粧品の両方を同時にテストする場合は、少し離れた位置に塗ってください。

3 電源を入れて塗布部にあてる（上部画像を参照ください）

- 1) 電源を入れ、
専用ジェルの場合 : RFモードに設定する
専用化粧品の場合 : IONモード、またはELPモードに設定する
- 2) ヘッドをあて、ゆっくり円を描くように動かす（約7秒）
終わったら、塗布部は自然乾燥させます。

4 48時間後の肌の状態を確認する

- ・塗布部は、こすらないでください。




注意

- ・肌トラブルを防止するために、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

使い方

充電する

1 USBケーブルをUSB電源アダプターと本体に接続する

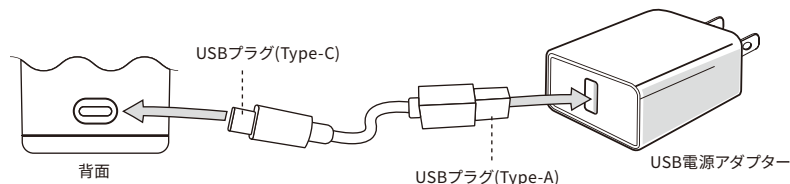

2 コンセントにUSB電源アダプターをしっかりと差し込むと電源ボタンが点滅し、充電がスタートします

3 充電終了のアラーム音（BEEP×3回）と同時に電源ボタンが消灯したら、USB電源アダプターをコンセントから抜き、USBプラグを本体から抜く

充電時間：約3時間（室温15～35℃）

1回のフル充電で、約1週間使えます。（P.11使用例の使いかたの場合）
ただし、使用環境や使い方によって、使用できる回数が少なくなる場合があります。

※充電しながらもご使用いただけます。




注意

- ・初めてご使用になる時や半年以上使われなかった時は、充電時間が変化する場合があります。
- ・充電時間は、電池の状態により、変化する場合があります。
- ・充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。
- ・充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。
- ・付属のUSB電源アダプター・USBケーブル以外を使用すると充電できない場合があります。

使い方

肌の状態や悩みに合わせて、ご使用ください。
各モード（機能）の特長、使用頻度については、P.11を確認してください。

基本の流れ

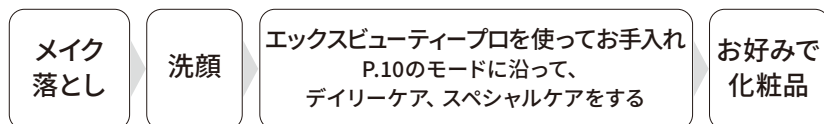

コットンの付け方

「IONモード」と「CLEANモード」は
コットンを付けて使用します。


1 本体からコットンリングを外す。

2 電極ヘッド部分にコットンをのせ、
コットンリングを押し込むように付ける。

コットンリングが装着しづらい場合は、コットンを半分に割いて使用してください。

3 コットンに専用クレンジングウォーター、
化粧水を付ける。

電極ヘッド全面にいきわたるようにコットンにしみこませてください。
コットンが乾いて、すべりが悪くなってきたら専用クレンジングウォーター、
化粧水をつけ足してください。

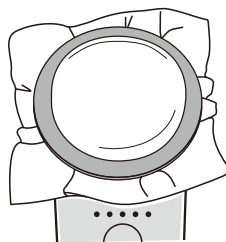

ケアの仕方

- 1 **メイクを落として洗顔する。**
油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
- 2 **使用するモードによって必要な場合はコットンを装着し、専用クレンジングウォーターや化粧品を付ける。**
- 3 **電源ボタンを長押しして電源をオンにする。**
モード切替ボタン、またはEMSボタンを押し、モード・レベルを選択する。
- 4 **側面の電極（シルバーの枠）に触れるように本体を持つ。**
- 5 **P17～21を参照に、ケアをする。**
- 6 **電源ボタンを長押しして電源をオフにする。**
- 7 **ケア終了後、お肌を整える。**

※ 使用后、エクスビューティープロ本体のお手入れをする。


動かしかた

- エックスビューティープロ本体は、1秒に2cm動かす程度で使用してください。
- 電極ヘッド部分がお肌に触れるように密着させて軽くすべらせながら使用してください。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因になり危険です。
- まぶた、のどぼとけには電極ヘッドをあてないでください。
- 半顔ずつお手入れをします。各モードの動かしかたに沿って左右同様に行ってください。
- 各モード5分経過すると、終了音と同時にスタンバイ状態になります。モードボタンでモードを切り替えるか、延長をしてください。
- スタンバイ状態で動作が確認できない場合、3分後にアラームが鳴り、自動オフします。

CLEANモード

コットンを装着、専用クレンジングウォーターを使用

コットンにクレンジングウォーターを含ませます。コットンが乾いて、すべりが悪くなってきたら専用クレンジングウォーターをつけ足してください。

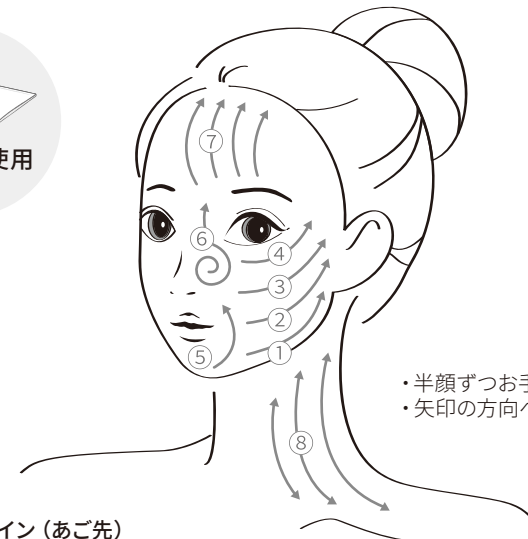


- ①フェイスライン (あご先)
あご先からフェイスラインを通して、耳の下まで
- ②フェイスライン (口角)
口角からフェイスライン通ってこめかみへ
- ③ほほ
顔の丸みにそって中心から外側へ、全体を斜め上に引き上げるように
- ④目の下
目じりに向かって
- ⑤口まわり
あご先から口角をもち上げるように
- ⑥小鼻まわりから鼻筋
小鼻まわりをらせんを描いてくるくると、鼻から眉間へ抜けるように
- ⑦ひたい
中央部、眉上から生え際に向かって
眉間の方へ場所を移動しながら同じ動きを繰り返す
- ⑧首・デコルテ
デコルテから耳下腺へ上に。耳下腺からデコルテに向けて上から下へ

RFモード

コットン不要、専用ジェルを使用

ヘッド部分に専用ジェルをのせてください。

すべりが悪くなってきたら専用ジェルをつけ足してください。

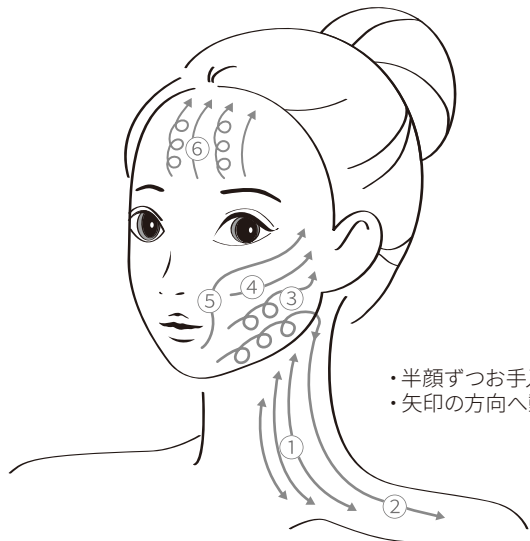

・半顔ずつお手入れを行います
・矢印の方向へ動かします

①首・デコルテ

首からデコルテのラインを上下に動かす

②フェイスライン (あご先)

あご先からこめかみに向かって、直線とらせんを混ぜながら
その後耳下腺から首側面を通り肩まで

③フェイスライン (口角)

口角からフェイスラインを通してこめかみへ、直線とらせんを混ぜながら

④ほほ

頬の丸みにそって中心から外側へ、全体を斜め上に引き上げるように
移動しながら

⑤口まわり

口角をもち上げるように
最後に口角から目頭迄あがって目の下を通してこめかみへ

⑥ひたい


眉上から髪の毛の生え際に向かって、直線とらせんを混ぜながら

IONモード

コットンを装着、専用化粧品を使用

コットンに専用化粧品を含ませます。

コットンが乾いて、すべりが悪くなってきたら専用化粧品をつけ足してください。

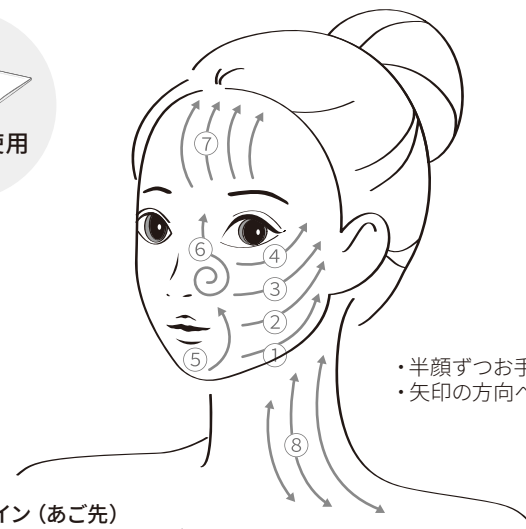

・半顔ずつお手入れを行います
・矢印の方向へ動かします

①フェイスライン (あご先)

あご先からフェイスラインを通して、耳の下まで

②フェイスライン (口角)

口角からフェイスライン通ってこめかみへ

③ほほ

頬の丸みにそって中心から外側へ、全体を斜め上に引き上げるように

④目の下

目じりに向かって

⑤口まわり

あご先から口角をもち上げるように

⑥小鼻まわりから鼻筋

小鼻まわりをらせんを描いてくるくと、鼻から眉間へ抜けるように

⑦ひたい

中央部、眉上から髪の毛の生え際に向かって
眉間の方へ移動しながら同じ動きを繰り返す


⑧首・デコルテ

デコルテから耳下腺へ上に。耳下腺からデコルテに向けて上から下へ

ELPモード

コットン不要、専用導入美容液を使用

ヘッド部分に専用導入美容液をのせます。すべりが悪くなってきたら専用導入美容液をつけ足してください。※専用導入美容液は開封後必ず1回で使いきってください。

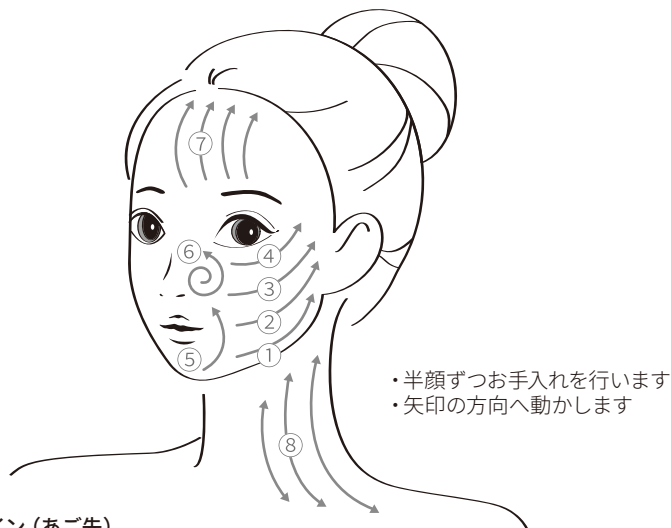


- ①フェイスライン (あご先)
あご先からフェイスラインを通して、耳の下まで
- ②フェイスライン (口角)
口角からフェイスラインを通してこめかみへ
- ③ほほ
頬の丸みにそって中心から外側へ、全体を斜め上に引き上げるように
- ④目の下
目じりに向かって
- ⑤口まわり
あご先から口角をもち上げるように
- ⑥小鼻まわりから鼻筋
小鼻まわりをらせんを描いてくるくと上に。鼻から眉間へ抜けるように
- ⑦ひたい
中央部、眉上から髪の毛の生え際に向かって
眉間の方へ移動しながら同じ動きを繰り返す
- ⑧首・デコルテ
デコルテから耳下腺へ上に。耳下腺からデコルテに向けて上から下へ

EMSモード

コットン不要、専用ジェルを使用

ヘッド部分に専用ジェルをのせてください。すべりが悪くなってきたら専用ジェルをつけ足してください。

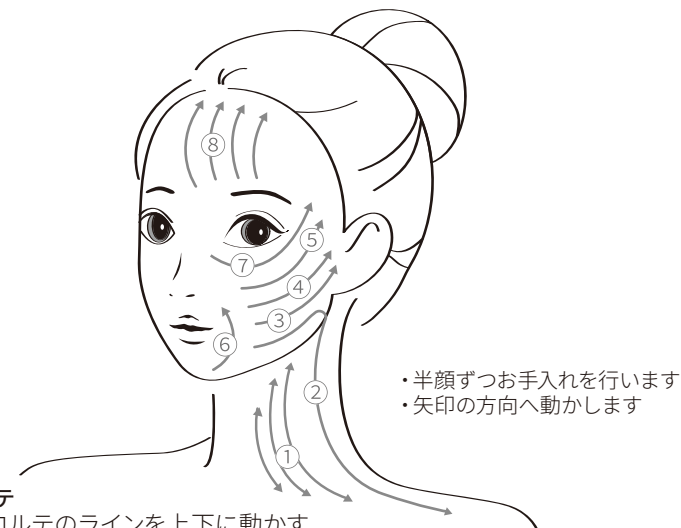

- ①首・デコルテ
首からデコルテのラインを上下に動かす
- ②フェイスライン (あご下)
あご下からフェイスラインを通して、耳の後ろまで
その後耳下腺から首側面を通り肩まで
- ③フェイスライン (あご先)
あご先からフェイスラインを通して、こめかみまで
- ④フェイスライン (口角)
口角からフェイスラインを通してこめかみへ
- ⑤ほほ
頬の丸みにそって中心から外側へ、全体を斜め上に引き上げるように
- ⑥口まわり
口角をもち上げるように
- ⑦目の下
目頭から目の下を通して目じりに向かって
- ⑧ひたい
眉上から髪の毛の生え際に向かって、移動しながら
生え際中央からこめかみに向かって

使い終わったら

肌を整える

日頃お使いの化粧品でケアをしてください。

使用後は毎回本体のお手入れをしましょう

コットンリングを外し、本体・電極ヘッドをふく

電源が切れていることを確認してください。


1 水で濡らし、きつく絞った布などで、本体や電極ヘッド部分に残ったジェルや化粧品をふき取る。

※水につけないでください。

2 コットンリングは、本体から外した状態で水洗いする。

3 乾いた布でふき、水分をふき取ってから保管する

- ・ソケットに水滴が付着している場合は十分にふき取ってください。
- ・USBケーブルは本体に巻きつけて保管しないでください。

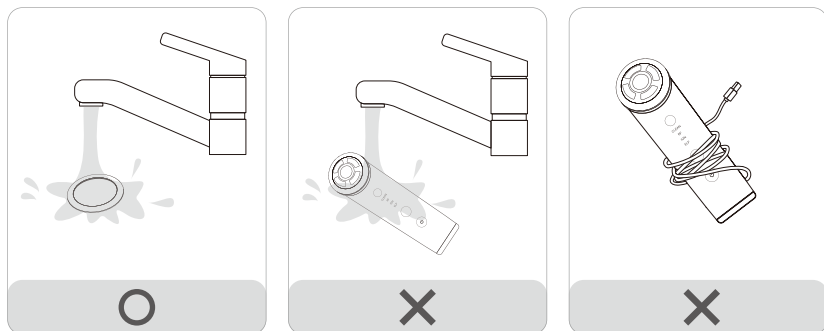

洗剤、アルコール、除光液など、水以外のものを使用しないでください。付着したジェルや化粧品は、確実に落としてください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

よくあるお問い合わせ

各機能について

Q.質問

A.回答

CLEANとは？

イオンクレンジングのことです。通常のクレンジング・洗顔では落とすきれない角質層に帯電する汚れをイオンの力（電気）と振動を使って取り除きます。

RFとは？

Radio Frequency（ラジオ波）とも呼ばれる高周波のことです。高周波振動により肌深部を温めることでよりケアに適した状態にします。

IONとは？

イオンの力（電気）で効果的に角質層へ美容成分を届ける技術のことです。

キャビテーションとは？

超音波トリートメントのことです。1秒間に300万回（3MHz）の微細な超音波の振動が肌に適度な運動効果を与えます。

ELPとは？

エレクトロケアのことです。通常では浸透しにくい高分子の美容成分を、電気刺激によって肌の奥*まで浸透させて、美容効果を高めます。
*角質層

EMSとは？

電気刺激により筋肉を効果的に収縮させる機能（「Electrical Muscle Stimulation」の略）のことです。

LEDとは？

肌をフォトケアする技術のことです。（P.10）

使用部位・頻度

手やボディにも使っているの？

顔、デコルテ、首の美容目的のみにご使用ください。

自分以外にお手入れをしてあげてもいいの？

家庭用美顔器（セルフ使用）として開発しています。ご自身のお手入れのみにご使用ください。

お風呂で使用できる？

エクスビューティープロは、防水製品ではないため、お風呂場での使用はできません。水回りでの使用もおやめください。

海外でも使用できる？

「海外で使うとき」（P.27）をご確認ください。

よくあるお問い合わせ

使用部位・頻度 (つづき)

1日何回使っても大丈夫？
デイリーケア、スペシャルケアにより使用頻度が異なります。「モードについて」(P.11)の使用頻度をご確認ください。

どんな肌質、肌状態の人でも使用できる？
本書P.5 - P.8記載の使用不可に該当する方は、ご使用をお控えください。

使用化粧品について

ELPで、専用美容液以外を使っても大丈夫？
エクスビューティープロ Cエッセンス ピュアは、エクスビューティープロでの導入用に開発された専用美容液です。それ以外をご使用いただいた場合、一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

ELP1回のケアで、専用美容液は何個まで使用できますか？
個数の使用制限はありませんが、使用頻度を守ってお使いください。「モードについて」(P.11)の使用頻度をご確認ください。

ELP専用美容液をION機能でも使えますか？
ELP専用美容液は、肌の奥深く*まで成分を届けることを目的に、高分子成分も配合しています。ION機能では、高分子の成分導入は出来ないのでおすすめしません。 ※角質層

使用後に使う基礎化粧品は、どんなものがいいの？
エクスワンで販売していますスキンケアシリーズをお勧めします。

肌について

美容液やジェル、クレンジングウォーターがしみたり、肌にトラブルが起きたら？
肌の状態が治るまで、使用をお控えください。(専門医にご相談ください)
・肌が敏感になっている可能性があります。
・体調・ストレス・体質・内臓疾患によっても、トラブルが起こることがあります。

RFの温感について

熱く感じるのですが
使用中はヘッドを同じ箇所にあて続けず、必ず肌の上を移動しながらお使いください。

熱さを感じません
肌に水分が足りないか乾燥していませんか？ジェルを足してご使用ください。

よくあるお問い合わせ

ELPの刺激について

ピリピリするのですが
ヘッド部分全体が肌にあたっているか確認してください。ヘッド部分が乾いていませんか？専用美容液を足してご使用ください。

EMSの刺激について

弱く感じるのですが
・専用ジェルまたは化粧品が足りないと、EMSの刺激を感じにくくなるため、つけ足してお使いください。
・レベルを上げてください。
・ヘッド部分全体が肌にしっかりあたっていますか？

ピリピリする、または熱く感じるのですが
レベルを下げてください。

歯に痛みを感じたら？
歯の神経に刺激を与える場合があります。特に歯に詰め物がある場合はご注意ください。
・レベルを下げてください。
・強くあて過ぎず、部位をずらしてお使いください。

電池

電池はどのくらいもつの？
3年程度(ただし、保証は1年)です。
・フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化する場合があります)

電池は自分で交換できるの？
ご自分ではできません。(故障の原因)お客様相談室にご相談ください。

長期間使わないと、電池が劣化するのでは？
劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。

毎回充電しても、電池寿命は大丈夫ですか？
リチウムイオン電池の保証期間内であれば、電池の寿命には影響ありません。

その他

使わないとき、ずっと充電していてもいいの？
3時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのためUSB電源アダプターを抜いてください。

故障かな?と思ったら修理を依頼する前にまず、ご確認ください。

以下の内容を確認しても、なお異常がある場合はUSB電源アダプターを抜いてお客様相談室へご連絡ください。修理を依頼される場合は、保証書・本体・USB電源アダプター・USBケーブルを揃えてご提示ください。

電源ボタンを押しても電源が入らない
充電できていますか?USBケーブルを本体に繋ぎ、USB電源アダプターをコンセントに差し込んで充電をしてください。充電中は電源ランプは点滅します。

付属以外のUSB電源アダプターとUSBケーブルを使用していませんか? (P.13)

モードが選択できない
電源 / モード選択スイッチを長押し(約1秒)していますか?満充電状態ですと、電源ランプは点灯します。

使用中に電源が切れる
充電切れではありませんか? (P.13)
各モードが終了すると、自動で電源が切れます。イオンパネルに手がしっかり触れた状態で、ヘッドを肌にあてていますか? (P.15)

フル充電しても数分しか使えない
購入後、3年以上たっていませんか?電池の寿命が考えられます。ご自分で交換せず、お客様相談室にご連絡ください。故障の原因となります。

付属以外のUSB電源アダプターとUSBケーブルを使用していませんか? (P.13)

廃棄するときのお願い

内蔵している電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品の廃棄に際しては、一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。

- ・充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。

本製品の使用電池

名 称	リチウムイオン蓄電池
公称電圧	3.7V/2000mAh
数 量	1 個

海外で使うとき

警告



次の行為を守ってご使用ください。守れない場合、感電や火災、けがの原因となります。

- 必ず交流100~240Vで使用する。
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
 - ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
 - ・プラグ変換アダプターについては、旅行会社、家電量販店にご相談ください。

製品仕様

電源方式	充電式
定格電圧	100-240V～50/60Hz
定格容量	DC5.0V/3.0A
消費電力	約5W (充電時)
使用電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間	3時間
本体サイズ	W 46×D 51×H 150 mm
本体重量	約200g
付属品	コットンリング/USB電源アダプター/USBケーブル
連続使用時間	フル 約40分/CLEAN 約300分/RF 約30分/ ION 約70分/ELP 約60分/EMS 約60分

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.26)でご確認のあと、直らないときは、まずUSB電源アダプターを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

ご購入日	・品名 エクスビューティープロ
	・製品番号
	・故障の状況(できるだけ具体的に)

- 保証期間中は、保証書の規定に従って修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてお送りください。
- 保証期間終了後は、お預かり診断、修理見積をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
送料	修理品をお預かりする機関の無料貸出機発送料、修理品の発送料

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、販売終了後5年保有しています。

エックスワン商品全般に関するご相談窓口 使い方やお手入れ方法、修理のご相談窓口

エックスワン会員以外のお客様もご利用いただけます。

「エックスワンお客様相談室」

 **0120-039-198**

受付時間 9:00-18:00（但し、土・日・祝日を除く）

■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6822-3435
メールアドレス customer@x-one.co.jp

♡ 愛情点検

こんな症状はありませんか？

- ・コードやUSB電源アダプターが異常に熱い。
- ・本体やUSB電源アダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントからUSB電源アダプターを抜いて、
必ずお客様相談室に点検をご依頼ください。

定期的にエックスビューティープロの点検を行いましょう！

X-Beauty Pro