

塑造吹弹可破的无龄美肌

Rebeauté

电穿孔、EMS美容仪 <Rebeaute>



让你足不出户就能享受到全身医疗护理 将胶原蛋白导入到肌肤深层 提拉紧致，让肌肤更有弹性

<Rebeaute> 是一款轻松在家就能享受全身护理的电穿孔美容仪。

因其“塑造吹弹可破的无龄美肌”的功效在全身医疗护理的领域备受瞩目。

将保持年轻的要素 --- 胶原蛋白深层导入，塑造出紧致无龄美肌。

并且使用 EMS 功能按摩面部表情肌肉及需要的身体部位，一台机器就能完成全面护理。

唤醒 (re: 重生) 美丽 (beaute)，如同名称的寓意一样，这是塑造您光泽莹润肌肤的美容仪器。

颈肩

导入胶原蛋白，
容易暴露年龄的肩颈，
肌肤也将变得细致光滑。

唇部

柔软饱满的双唇，
唤醒女性魅力，
绽放玫瑰色泽。

眼角

革新的美容技术，
解决眼角护理的难题，
导入胶原蛋白，还原无龄美肌。

横扫难以护理的
肌肤死角

脸部线条

Light-EMS 模式 (L-EMS)
卓效提拉紧致，
塑成小脸美人。

脸颊

有效改善肌肤松弛，
补充胶原蛋白，
让肌肤弹力十足。

身体

利用 EMS 模式
紧致肌肤
塑造清爽美体



请配合专用美容液一起使用

Rebeaute 纯正胶原蛋白原液

重塑肌肤弹力，还原紧致美肌。
<Rebeaute 纯正胶原蛋白原液>
1次1瓶 一次性使用规格



配有清洁干净的探头，请使用吸管，
适量吸取滴用，用于全脸。

出于卫生上考虑，请务必1次将1整瓶<Rebeaute 纯正胶原蛋白原液>用尽。

向肌肤导入美肌成分的 Electroporation

电穿孔导入法

1 周 1 次的
特别
护理


难以渗透到肌肤深层的高分子、亲水性分子、胶原蛋白等美容液成分，
通过给予肌肤表层特殊的电脉冲波被输送到肌肤里层，
塑造紧致光滑、弹力十足、饱满润泽的肌肤。

只要 10 分钟
体验紧致与弹力！

用于眼角



给予肌肤特殊的电脉冲波。
短时间内推开细胞，打开缝隙，
将大分子成分导入其中，
紧紧锁住有效成分。

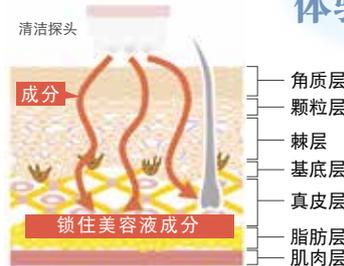

Rebeaute 纯正胶原蛋白原液

用电穿孔将锁水紧致不可或缺的胶原蛋白导入肌肤深层。

<内含成分>

琥珀酰赖氨酸胶原蛋白

美容（整形）领域的胶原蛋白注射中被广泛使用，是可安心使用的安全成分。
有效保护皮肤，提升肌肤水润度和弹力。

水溶性胶原蛋白

塑造平滑紧致无龄美肌不可或缺的胶原蛋白。
富含水分，
易于吸收渗透。

加水分解弹性硬蛋白

位于皮肤真皮层等的结缔组织。
呈纤维状的蛋白质。
束紧胶原蛋白纤维，保持肌肤弹力，恢复紧致美肌。

透明质酸

存在于真皮层。
高效锁水保湿，
帮助肌肤存储水分。

1 次 1 瓶
一次性
使用规格



混入杂质可能会引起品质变化，请务必开封即用，一次性使用 1 整瓶。

用于法令纹

锻炼肌肉 EMS※（用于脸部 & 身体）

通过电力直接活动肌肉，
锻炼脸部表情肌肉，
改善松弛，延缓衰老。
还可使用于身体，
通过锻炼肌肉，
塑造紧致之美，
拥有完美线条。

EMS 是“Electrical Muscle Stimulation”的缩写

电力刺激直达肌肉层，活动肌肉，
提高肌肉韧性。



仅需 20 ~ 30 分钟
的护理
塑造完美线条

脸部
1 周 1 次
身体每天都
可使用！

如此高性能操作却十分简单！

体积轻巧，构造简单，便于携带。
表盘标识明确易懂，任何人都能轻松使用。



1 电池
本体采用充电式，省去电线，方便使用。
指示灯不间断闪烁时，请充电以便继续使用。



2 计时
时间表盘
方便计算使用时间



3 单式按钮
电穿孔模式、EMS 模式（脸部用）、EMS 模式（身体用）
集中于一个按钮。
可选择调节使用。



4 程度标识
可轻松读取电穿孔模式
以及 EMS 模式的强度。



直径
约 42mm

易握握，体积小。
探头使用方法简单，轻松上手。
电穿孔模式以及 Light-EMS 模式（L-EMS）的面部护理时使用。
顶部素材：POM（乙酸酐树脂）



长 80mm
X
宽 50mm

EMS 垫
在 EMS（身体用）模式使用。
左右对称一侧两片，共四片
贴用于身体。
垫子素材：保护膜 内面硅化处理 聚酯保护膜

1周1次特别护理

Face — 塑造理想的肌肤 —

<p>Step1</p> <p>卸妆、洁面</p>  <p>INUP EX 卸妆乳 MD</p> <p>INUP EX 卸妆泡沫 MD</p>	<p>Step2</p> <p>离子卸妆</p> <p>5分钟</p>  <p>PRO AGEQUE</p> <p>X-one 卸妆水</p> <p>※未购入PRO AGEQUE的客户 请仔细完成卸妆、洁面步骤。</p>	<p>Step3</p> <p>电穿孔护理</p> <p>10分钟</p>  <p>Rebeaute</p> <p>Rebeaute 纯正 胶原蛋白原液</p>	<p>Step4</p> <p>Light-EMS(L-EMS)</p> <p>10分钟</p>  <p>Rebeaute</p> <p>X-one 离子润滑胶</p>	<p>Step5</p> <p>日常护肤</p>  <p>使用化妆水、美容液、护肤霜 进行日常护肤。</p> <p>INPX 系列</p> <p>LIBREAGE RICH 系列</p> <p>等</p>
--	---	---	--	---

电穿孔

电穿孔护理


请于卸妆、洁面、离子卸妆后使用

- 使用附送的吸管吸收足量Rebeaute纯正胶原蛋白原液滴于清洁探头
- 用探头将原液涂在脸部之后再行护理。护理之后请擦去或用水冲去残留部分。(肌肤所需成分已被完全导入。)

1周1次护理

【探头的移动方法】

- 下巴(脸部线条) 从下巴提升至太阳穴
- 脸颊 沿着肌肤走向由中心往外整体往斜上方提拉
- 嘴巴周围 由嘴角往上提
- 眼睛周围 将眼角往上提
- 额头 从眉间往发际线移动
- 颈、肩 由下往上

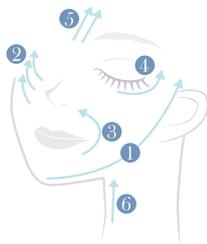

※肌肤及探头上原液干燥后，移动不顺畅时请添加分量继续使用

Light-EMS 模式 (L-EMS: 脸部)

1周1次护理

(仅使用Light-EMS模式的情况)
卸妆、洁面后，请涂抹适量离子润滑胶于皮肤，使用探头直接接触皮肤。结束后清洗干净。
※探头的移动方式同电穿孔模式

EMS (身体)

洗浴后使用效果更佳。
将同色的垫子贴于一块肌肉的首部及尾部。
垫子两片为一对。
请调节至明显感觉到肌肉收缩的级别。
结束后使用护理膏按摩效果更佳。

【EMS垫的正确粘帖位置】

可以每天使用



Rebeaute基本套装
本体价格 117,100日元
商品编号 306

<套装内容>

- Rebeaute(本体)x1
- Rebeaute 脸部探头 (电穿孔模式、L-EMS模式兼用)x1
- EMS垫(身体用)x4
- EMS专用线x1
- AC接头x1



Rebeaute纯正胶原蛋白原液
(5mLx4瓶)※附带吸管
本体价格 11,700日元
商品编号 307

替换用品

Rebeaute替换装
EMS垫(4片装)
本体价格 2,700日元
商品编号 308

※请在无法再粘于皮肤时替换

替换用品

Rebeaute专用
AC接头
本体价格 3,677日元
商品编号 445

请仔细阅读使用说明书后正确使用。以下人群请避免使用。(详细记载于使用说明书内)
孕妇、使用电子医疗器械(心脏起搏器等)的人群、敏感性皮肤人群、患有疾病的人群

<Rebeaute基本套装>未使用、未开封时，并且套装产品齐全时适用于【退款保障制度】。

我有自信推荐。



X-one 股份有限公司 官方网站 www.x-one.co.jp

〒107-0062 东京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F Tel 03-6891-8000 (代表)

X-one股份有限公司自1987年成立以来，为给客户创造健康美好的生活，公司在化妆品、健康食品等方面，为客户提供了更“安全”、更“高品质”的产品。这些产品都是由公司自主研发，真正做到通过客户的体验来了解我公司的产品特征。

化妆品专用咨询窗口 <美丽热线> 0120-772-901 服务时间:上午9点~下午6点 (除周六、周日、节假日) 如有问题或咨询 请致电客服咨询专线 0120-039-198 服务时间:上午9点~下午6点 (除周六、周日、节假日)

※因印刷原因，商品颜色会与实物产生色差，敬请谅解。※本体价格中不含有消费税。禁止未经许可擅自使用所刊登的内容事项。XAW [6306-ch] 00615



出于环境保护的目的，
本印刷物使用植物油油墨。